


BOMIDI

Almohada Masajeadora MP1

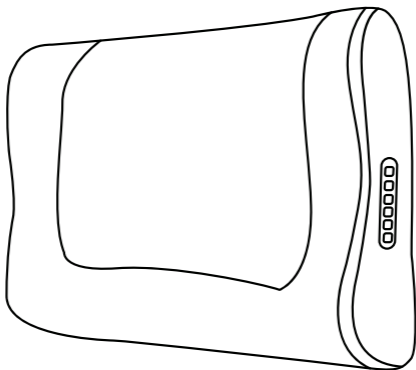

Instrucciones

Estimado usuario

Gracias por comprar nuestro producto. Para hacer un mejor uso del mismo, por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. ¡El inicio del uso del producto implica que usted tiene una comprensión detallada de cómo utilizarlo!

Nota: Nuestra empresa se reserva el derecho de mejorar el producto y las instrucciones. Si hay algún cambio, no se le notificará por separado. El color y la apariencia del producto están sujetos al producto real.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- 1.Si tiene problemas de salud, consulte a un médico antes de usar este producto.
- 2.Los pacientes con enfermedades cardíacas deben consultar a un médico antes de su uso.
- 3.No permita que los niños utilicen este producto solos.
- 4.No lo utilice en la misma zona del cuerpo por más de quince minutos.
- 5.El uso prolongado puede provocar fácilmente que el producto se sobrecaliente y acorte su vida útil. Si esto sucede, deje de usarlo hasta que el producto se enfríe.
- 6.No utilice este producto directamente sobre áreas de la piel hinchadas, inflamadas o con laceraciones.
- 7.Este producto es un dispositivo no profesional y no puede utilizarse como sustituto de un tratamiento médico; las personas no sensibles al calor deben tener cuidado al usarlo.

8.No utilice el dispositivo antes de ir a dormir, ya que este producto tiene un efecto estimulante y retrasará la conciliación del sueño.

9.No utilice este producto mientras duerme.


10.Las personas con extremidades afectadas, discapacidades sensoriales o mentales, o con falta de conocimientos y experiencia relevantes, no pueden utilizar este producto a menos que alguien las guíe y puedan usarlo bajo su supervisión y seguridad.

11.La superficie del dispositivo se calienta; las personas que no son sensibles al calor deben tener cuidado al utilizarlo.

Parámetros del producto

Nombre del producto	Almohada de masaje
Modelo del producto	MP1
Voltaje nominal	12V
Potencia nominal	24W
Temporizador automático	15 min

Instrucciones de funcionamiento

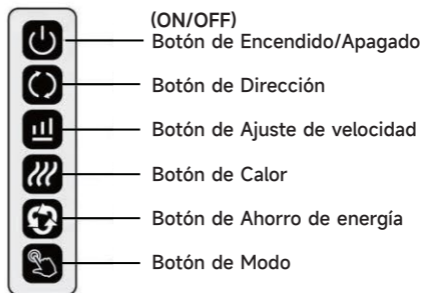

Botón de Encendido/Apagado (On/Off)

1.Presione brevemente el botón de encendido para encender el producto. Ajustes predeterminados: Encendido, temporizador de 15 minutos, compresora de calor alto, tres ajustes de masaje y modo de velocidad constante.

2.Presione brevemente el botón de encendido mientras el producto está encendido para apagarlo.

Botón de Dirección de giro

Con el producto encendido, presiona brevemente el botón para cambiar el sentido del giro hacia adelante. Presiona nuevamente para cambiar al sentido inverso (reversa).

Botón de Ajuste de velocidad

Con el producto encendido, presiona brevemente este botón para ajustar la intensidad del masaje (intensidad baja, media, alta, etc.).

Botón de Calor

Cuando el producto está encendido, la función de calor se activa de forma predeterminada. Presiona una vez para apagar el calor.

Botón de Ahorro de energía

Presiona este botón para activar el modo de ahorro de energía. En este modo, la luz se atenúa y el cabezal de masaje gira automáticamente. Presiona el botón nuevamente para salir del modo de ahorro de energía.

Botón de Modo

Presiona el botón de modo para cambiar entre los diferentes estilos de masaje disponibles.

Tarjeta de Garantía

- 1.La garantía aplica únicamente para defectos de fábrica.
- 2.No es válida en caso de daños mecánicos, mal uso o intentos de reparación por cuenta propia.
- 3.Para reparaciones, por favor póngase en contacto con nuestro centro de servicio.

Nombre del producto	
Modelo del producto	
Nombre del cliente	
Número de teléfono	
Motivo de la devolución	
Fecha	