


BOMIDI

Masajeador de cuello con función
de amasado

Modelo: MP2 Lite

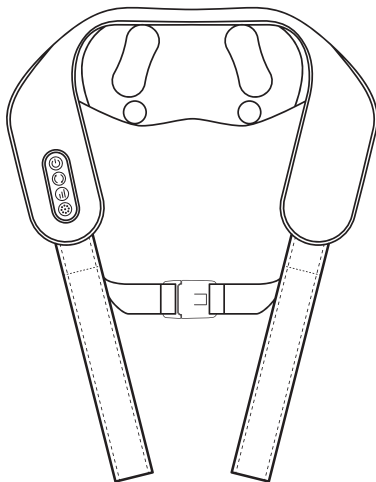

Instrucciones de uso

Lea atentamente y conserve este manual antes de usar el producto.

CONSIDERACIONES

1. Lea atentamente las instrucciones de uso.

2. No utilice este producto por periodos prolongados para evitar dolores musculares por uso excesivo.

3. No lo utilice mientras esté acostado boca arriba o semirecostado.

4. Este producto no es apto para el siguiente tipo de personas:

- Pacientes con anomalías cardíacas o nerviosas en el cuello.
- Pacientes con hiperplasia severa de las vértebras cervicales.
- Personas con deformaciones o curvaturas cervicales causadas por accidentes o enfermedades.
- Personas con trastornos severos de circulación sanguínea en hombros y cuello.
- Personas que no puedan manifestar incomodidad o malestar.

5. No utilice el producto para fines distintos a los descritos en este manual, ya que podría causar accidentes o fallos.

6. No desmonte, repare ni modifique este producto sin autorización, ya que puede ocasionar fallas o descargas eléctricas.

7. Este no es un dispositivo médico; por lo tanto, no es apropiado para usos médicos ni en entornos hospitalarios.

Limpieza del producto

Para limpiar la superficie del producto, utilice un paño ligeramente humedecido con agua o alcohol al 75%. No lave el producto directamente con agua.

Metodo de uso



Botón de encendido

Mantenga presionado para encender. Presione brevemente para apagar.

Encendido:

la luz indicadora verde permanece encendida.



Botón de modo de amasado

Con el dispositivo encendido, presione brevemente para alternar entre los dos modos de masaje.



Botón de intensidad de amasado

Con el dispositivo encendido, presione brevemente para alternar entre los 3 niveles de intensidad (por defecto en nivel 2).



Botón de calor

Al encender el dispositivo, la función de calor está desactivada por defecto.

Presione una vez para activar el nivel alto de calor.

Presione nuevamente para cambiar al nivel bajo.

Presione una tercera vez para apagar la función de calor.

Parámetros del producto

Nombre del producto	Masajeador de cuello con función de amasado
Modelo	MP2 Lite
Voltaje de entrada	5V
Potencia nominal	25W
Capacidad de la batería	7.4V-2000mAh

Metodo de carga

Este producto no incluye adaptador. No es compatible con carga rápida.

Utilice una fuente de alimentación de salida 5V/1A para cargar.

Durante la carga, la luz indicadora será roja.

Cuando esté completamente cargado, la luz será verde.

Desconecte suavemente el cargador tras la carga.

PELIGRO

1. La batería recargable incluida es específica para este producto y no debe utilizarse en otros dispositivos. No recargue baterías retiradas.
2. No arroje al fuego ni exponga a altas temperaturas.
3. No perforo con objetos, no golpee ni desmonte/modifique.
4. No almacene con collares, horquillas, etc.
5. No lo cargue, utilice ni coloque en lugares con altas temperaturas, como cerca de estufas o bajo la luz solar directa. Estas condiciones pueden provocar sobrecalentamiento, incendios o explosiones.

ADVERTENCIA

Mantenga las baterías fuera del alcance de niños pequeños para evitar ingestas accidentales.

En caso de gestión, acuda de inmediato al médico.

En caso de fuga de líquido de la batería:

1. Si entra en contacto con los ojos, hay riesgo de ceguera. No frote los ojos; enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
2. Si entra en contacto con la piel o ropa, puede causar inflamación o lesiones. Enjuague con agua limpia. Si persisten molestias, acuda al médico.
3. El producto debe ser desechado de forma segura. De lo contrario, puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Conserve esta tarjeta como comprobante de garantía. En caso de uso y mantenimiento normales, si se detectan fallos por materiales o defectos de fabricación, la empresa ofrecerá servicio postventa tras su verificación.

Nombre del producto	
Modelo	
Nombre del cliente	
Teléfono	
Razón de devolución o cambio	
Fecha de mantenimiento	

NOTA IMPORTANTE

El cliente debe seguir las instrucciones de uso. La empresa no se hace responsable por daños directos o indirectos derivados del uso incorrecto o fallos del producto.

Casos excluidos de la cobertura de la garantía:

1. Si el modelo, número de serie o factura han sido modificados o borrados.
2. Daños causados por uso indebido, negligencia, reparaciones no autorizadas o uso distinto al previsto.
3. Daños estéticos, piezas consumibles o accesorios no están cubiertos.
4. El cliente será responsable de llevar y recoger el producto a nuestro centro de servicio. Las piezas defectuosas que sean objeto de reparación serán propiedad de la compañía.
5. Artículos no reclamados en 30 días desde la notificación serán eliminados.
6. Todos los términos están sujetos a cambio sin previo aviso. En caso de disputa, la empresa se reserva el derecho de decisión final.
7. El tiempo del masaje será diferente dependiendo de su peso.